

# クッションと思ったら 本格派マッサージャーでした

しかも!  
4つの  
もみ玉 + ヒーター



裏面のもみ玉が、心地よさのヒミツ!

AX-HL148

ルルド マッサージクッション

## Massage Cushion

AX-HL148iv  
(アイボリー)

AX-HL148pk  
(ピンク)

AX-HL148br  
(ブラウン)



>>> 管理医療機器

< 効果・効能 >

あんま、マッサージの代用

血行促進

疲労回復

筋肉の疲れをとる

コリをほぐす



# もみ玉&ヒーター内蔵クッション誕生！ 快適と使い心地にこだわった 8 つのポイント



## 1 4つのもみ玉&ヒーター

合計4つのもみ玉が回転し、マッサージをします。ヒーター付きなので、寒い日もポカポカ。

## 2 ふかふか生地

ふわふわソフトな風合いのカバー生地を使用。心地よい肌触りでくつろげます。


## 3 洗濯機OK

本体カバーは取り外して洗濯可能。いつも清潔にご使用いただけます。  
(洗濯機をご使用の際は、洗濯ネットをご利用ください)

## 4 立体フォルム

どの体勢でマッサージしてもフィット感が気持ちいいピラミッド形状。

もみ玉 ヒーター

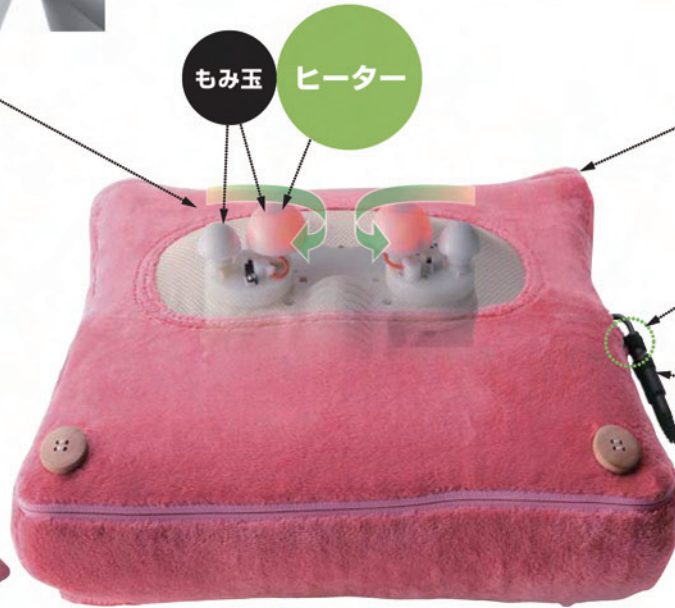

## 5 もみ玉カバー

マッサージ面にはもみ玉カバー付き。もみ心地の調節やクッション時のカバーとして使えます。



## 6 引っ張り防止ゴム付き

電源コードの抜け、断線・ラブルを防ぐ、引っ張り防止ゴム付き。

## 7 コード収納

本体カバーの中に電源コードを収納できるため、クッション時も邪魔になりません。


## 8 ワンボタン操作

マッサージやヒーターの操作がボタン1つでOK。どなたでも簡単にご使用いただけます。



## 好きな場所で、好きな姿勢で… マッサージの使い方はいろいろ！

上下を入れ替えるともみ上げorもみ下げのチェンジが可能。もみ玉の高さも変わるので、お好きな位置に調節できます。

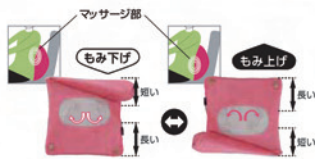

腰の  
マッサージ



ふともも  
ふくらはぎの  
マッサージ



首・肩の  
マッサージ

品番 AX-HL148br(ブラウン) AX-HL148iv(アイボリー) AX-HL148pk(ピンク)

JAN

仕様

■素材 ウレタンフォーム 表地:ポリエステル カバー:ポリエステル(起毛加工)、ポリエステル55%・ナイロン45%(マッサージ部)  
■本体 定格:DC12V 9W(ヒーター2W) ■アダプター 定格電圧:入力AC100V 50/60Hz 出力DC12V 2A ■回転数:30回転/分  
■ヒーター温度特性:最大50℃ ■タイマー:15分自動OFF ■付属品:ACアダプター  
■生産国:中国 ■医療機器認証番号:221AGBZX00224000

サイズ/重量

希望小売価格 ¥14,800(税込)

## 定期的に点検を！



ご使用の際  
こんな症状は  
ありませんか

- スイッチを入れても運転しないときがある。
- 運転音が異常に大きくなる。
- 本体・電源コード・プラグが異常に熱い。
- 漏電ブレーカーがひんぱんに落ちる。
- 運転中異常な音や振動がする。
- その他の異常や故障がある。
- コゲ臭い。

ご使用  
中止

故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから差込みプラグをはずし、必ず販売店にご連絡ください。点検、修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

## ⚠️ 安全に関するご注意 ■ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

下記の方は必ず医師と相談のうえ使用する。  
●急性疾患の人・悪性腫瘍のある人・妊娠中の人 ●アレルギー体質で敏感肌の人 ●皮膚炎、過度の日焼け等、皮膚に異常のある人  
●肌に傷や湿疹、はれもの等のある人  
医師からマッサージを禁じられている方は使用しないでください。(血栓症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤など)  
一般家庭で使用してください。